

# SureFood® GMO Kits

Für den qualitativen und quantitativen Nachweis von gentechnisch veränderten Organismen in Lebens- und Futtermitteln



Manuelle & semi-automatisierte DNA-Präparation für komplexe Proben



Multiplex Screening



Qualitativer Nachweis und Quantifizierung

Mehr Informationen:




<https://r-b.io/pcrgmode>

# GMO Analyse in Lebens- und Futtermitteln

Derzeit konzentrieren sich die Routineanalysen zum Nachweis von gentechnisch veränderten Organismen (GVO) auf gentechnisch veränderte Nutzpflanzen.

Die meisten gentechnisch veränderten Nutzpflanzen enthalten bestimmte Promotor/Terminator-Sequenzen (z. B. 35S, NOS, FMV), die in diesen Pflanzen nicht natürlich vorhanden sind. Diese DNA-Sequenzen werden häufig in der Gentechnik eingesetzt und kommen daher in verschiedenen GV-Pflanzen vor. Die betreffenden GV-Linien werden dann jeweils auf die unterschiedlichen Screening-Elemente hin überprüft.

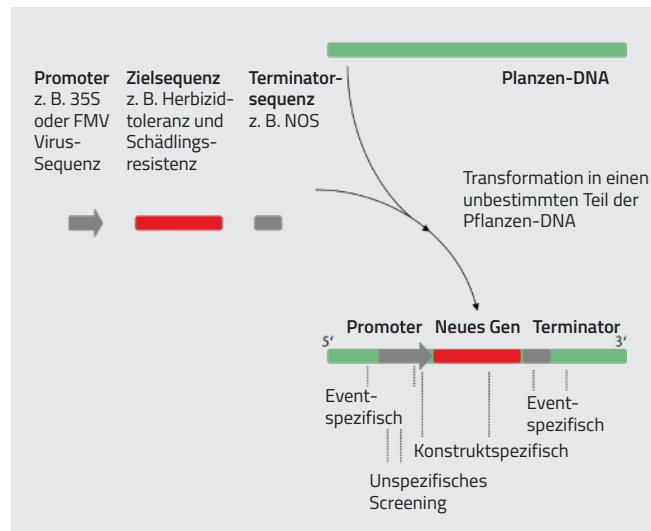

**Fig.:** Mit gentechnischen Verfahren können einzelne aus anderen Organismen stammende Gene gezielt in das Erbgut einer Pflanze übertragen werden.

## Mehrstufige Analysemethode für GMO Produkte:



**Einheitliche DNA-Präparation**

Manuell – Spin-Filter basierend

**SureFood® PREP Basic**  
Für Rohstoffe und schwach prozessierte Lebens- und Futtermittel

**SureFood® PREP Add On**  
Für 2 g Probeneinwaage

**SureFood® PREP Advanced**  
Für stark prozessierte Proben

Halbautomatisiert – Magentic-Beads

**SureFast® Mag PREP Food / TANBead Maelstrom**  
Für Rohstoffe, schwach und stark prozessierte Lebens- und Futtermittel



**Modulares qPCR-System**

Unspezifisches Multiplex-Screening

**SureFood® GMO SCREEN**

- Schnelle und umfassende Analyse
- Aussage ob GMOs vorhanden sind oder nicht

Multiplex-Identifizierung

**SureFood® GMO ID**

- Spezifisches Nachweisverfahren zum Ausschluss von nicht zugelassenen GMOs
- Für nicht zugelassene GMOs besteht in der EU eine 0 %-Toleranz

Relative Quantifizierung

**SureFood® GMO QUANT**

- Gemäß der EU-Verordnung EC1829/2003 und EC 1830/2003 - müssen Lebensmittel mit einem zulässigen GMO-Anteil von > 0.9 % pro Matrix gekennzeichnet werden
- Für Futtermittel gilt Verordnung EC 619/2011
- Die Quantifizierung der GMO-Ergebnisse erfolgt proportional bezogen auf die jeweilige Pflanzenmatrix



**Ihre Vorteile**

**Benutzerfreundlich:**

- Standardisierte Probenvorbereitung, qPCR-Set-up und Thermoprofile
- Extrahierte DNA kann für zusätzliche Tests verwendet werden (z. B. Allergene)
- Simultane qPCR-Analyse GMO und Allergen-Proben

**Zeitsparend:**

Halbautomatisierte DNA-Extraktion und Multiplex-Kits

**Alles aus einer Hand:**

Kits, Geräte, Support

**Flexibel:**

qPCR-Cycler: FAM, VIC, HEX, Cy5



# Screening-Tabelle gängiger GMO-haltiger Kulturpflanzen

Durch die Kombination verschiedener Vektoren ist es möglich, das Vorhandensein bestimmter GVO-Ereignisse ein- oder auszuschließen.

GMO event	OECD	S2126			S2127				S2128
		P-35S	T-NOS	FMV	BAR	NPTII	pat	CTP2:CP4E PSPS	CryIAb
<b>Soya</b>									
A2704-12	ACS-GMØØ5-3	+	-	-	-	-	+	-	-
A5547-127	ACS-GMØØ6-4	+	-	-	-	-	+	-	-
DAS-68416-4	DAS-68416-4	-	-	-	-	-	+	-	-
DAS-81419	DAS-81419-2	-	-	-	-	-	+	-	-
DAS-44406-6	DAS-44406-6	-	-	-	-	-	+	-	-
DP-305423	DP-3Ø5423-1	+	-	-	-	-	-	-	-
FG72	MST-FGØ72-2		+	-	-	-	-	-	-
FG72 x A5547-127	MST-FGØ72-2 x ACS-GMØØ6-4	+	+	-	-	-	+	-	-
GMB151	BCS-GM151-6	+	-	-	-	-	-	-	-
GTS 40-3-2 (RR-Sox)	MON-Ø4Ø32-6	+	+	-	-	-	-	-	-
MON87705	MON-877Ø5-6	-	-	+	-	-	-	+	-
MON87751	MON-87751-7	-	-	-	-	-	-	-	+
MON87769 x MON89788	MON-87769-7 x MON-89788-1	-	-	+	-	-	-	+	-
MON87701	MON-877Ø1-2	-	-	-	-	-	-	-	-
MON87701 x MON89788	MON-877Ø1-2 x MON-89788-1	-	-	+	-	-	-	+	-
MON87708 x MON89788	MON-877Ø8-9 x MON-89788-1	-	-	+	-	-	-	+	-
MON87708	MON-877Ø8-9	-	-	-	-	-	-	-	-
MON87705 x MON89788	MON-877Ø5-6 x MON-89788-1	-	-	+	-	-	-	+	-
SYHTØH2	SYN-ØØØH2-5	+	+	-	-	-	+	-	-
<b>Corn</b>									
59122	DAS-59122-7	+	-	-	-	-	+	-	-
Bt11	SYN-BTØ11-1	+	+	-	-	-	+	-	+
GA21	MON-ØØØ21-9	-	+	-	-	-	-	-	-
MON810	MON-ØØØ1Ø-6	+	-	-	-	-	-	-	-
MIR162	SYN-IR162-4	-	+	-	-	-	-	-	-
MIR604	SYN-IR6Ø4-5	-	+	-	-	-	-	-	-
MON87411	MON87411-9	+	-	-	-	-	-	+	-
MON87419	MON-87419-8	-	-	-	-	-	+	-	-
MON87427	MON-87427-7	+	+	-	-	-	-	+	-
MON87460	MON-8746Ø-4	+	+	-	-	+	-	-	-
MON87751	MON87751.7	-	-	-	-	-	-	-	+
MON88017	MON-88Ø17-3	+	+	-	-	-	-	+	-
MON89034	MON-89Ø34-3	+	+	+	-	-	-	-	-
MZHØJG	SYN-ØØØJG-2	+	+	-	-	-	+	-	-
NK603	MON-ØØ6Ø3-6	+	+	-	-	-	-	+	-
NK603 x MON810	MON-ØØ6Ø3-6 x MON-ØØ81Ø-6	+	+	-	-	-	-	+	+
NK603 x T25	MON-ØØ6Ø3-6 x ACS-ZMØØ2-1	+	+	-	-	-	+	-	-
T25	ACS-ZMØØ3-2	+	-	-	-	-	+	-	-
T25 x MON810	ACS-ZMØØ3-2 x MON-ØØ81Ø-6	+	-	-	-	-	-	-	-
T25 /T14	ACS-ZMØØ2-1, ACS-ZMØØ3-2	+	-	-	-	-	+	-	-
TC1507	DAS-Ø15Ø7-1	+	-	-	-	-	+	-	-
<b>Canola</b>									
73496	DP-Ø73496-4	-	-	-	-	-	-	-	-
GT73 (RT73)	MON-ØØØ73-7	-	-	+	-	-	-	+	-
MON88302	MON-883Ø2-9	-	-	+	-	-	-	+	-
T45 (HCN28)	ACS-BNØØ8-2	+	-	-	-	-	+	-	-
<b>Cotton</b>									
GHB614 x LLCotton25	BCS-GHØØ2-5 x ACS-GHØØ1-3	+	+	-	+	-	-	-	-
LLCotton25	ACS-GHØØ1-3	-	+	-	+	-	-	-	-
MON15985	MON-15985-7	+	+	-	-	+	-	+	-
MON88913	MON-88913-8	+	-	+	-	-	-	+	-
MON531	MON-ØØ531-6	+	+	-	-	+	-	-	-
T304-40	BCS-GHØØ4-7	+	+	-	+	-	-	-	+

Bitte beachten Sie: Die Tabelle zeigt nur Beispiele und ist nicht vollständig.

# SureFood® GMO Kits

Produkt	Packungsgröße	Art. Nr.
<b>SureFood® PREP – DNA-Präparationen</b>		
SureFood® PREP Basic	100 Präparationen	S1052
SureFood® PREP Advanced	50 Präparationen	S1053
SureFood® PREP Add-On (For 2 g samples; in combination with SureFood® PREP Basic)	15 Präparationen	S1055
SureFast® Mag PREP Food	96 Präparationen	F1060
<b>Extraktionskontrolle</b>		
SureFast® Animal + Plant Control 3plex	100 Reaktionen	F4053
<b>SureFood® GMO</b>		
SureFood® GMO Plant PLUS	100 Reaktionen	S2049
SureFood® GMO Plant 4plex Corn/Soya/Canola/Cotton	100 Reaktionen	S2156
SureFood® GMO Plant 4plex Corn/Soya/Canola+IAC	100 Reaktionen	S2158
<b>SureFood® GMO SCREEN – qualitative real-time PCR</b>		
SureFood® GMO SCREEN 4plex 35S/NOS/FMV+IAC	100 Reaktionen	S2126
SureFood® GMO SCREEN 4plex BAR/PAT/NPTII/CTP2:CP4 EPSPS	100 Reaktionen	S2127
SureFood® GMO SCREEN CaMV	100 Reaktionen	S2027
SureFood® GMO SCREEN 4plex BAR/PAT/CryIAb/CTP2:CP4 EPSPS	100 Reaktionen	S2128
SureFood® GMO SCREEN P35S:BAR Rice	100 Reaktionen	S2022
<b>SureFood® GMO ID – qualitative real-time PCR</b>		
<b>Raps</b>		
SureFood® GMO ID 4plex Canola I	100 Reaktionen	S2166
SureFood® GMO ID 4plex Canola II	100 Reaktionen	S2167
<b>Mais</b>		
SureFood® GMO ID DAS-40278-9 Corn	100 Reaktionen	S2140
SureFood® GMO ID 4plex Corn I	100 Reaktionen	S2170
<b>Reis</b>		
SureFood® GMO ID Bt63 Rice	2 × 50 Reaktionen	S2024
<b>Soja</b>		
SureFood® GMO ID 4plex Soya I	100 Reaktionen	S2161
SureFood® GMO ID 4plex Soya II	100 Reaktionen	S2162
SureFood® GMO ID 4plex Soya III	100 Reaktionen	S2164
SureFood® GMO ID 4plex Soya IV	100 Reaktionen	S2165
<b>SureFood® GMO QUANT – quantitative real-time PCR</b>		
<b>Mais</b>		
SureFood® GMO QUANT 35S Corn	2 × 50 Reaktionen*	S2020
SureFood® GMO QUANT Bt176 Corn	2 × 50 Reaktionen*	S2015
SureFood® GMO QUANT Bt11 Corn	2 × 50 Reaktionen*	S2016
SureFood® GMO QUANT MIR162 Corn	2 × 50 Reaktionen*	S2135
SureFood® GMO QUANT MON810 Cornx	2 × 50 Reaktionen*	S2019
SureFood® GMO QUANT MON863 Corn	2 × 50 Reaktionen*	S2051
SureFood® GMO QUANT T25 Corn	2 × 50 Reaktionen*	S2017
SureFood® GMO QUANT TC1507 Corn	2 × 50 Reaktionen*	S2081
<b>Soja</b>		
SureFood® GMO QUANT Roundup Ready Soya	2 × 50 Reaktionen*	S2014
SureFood® GMO QUANT 35S Soya	2 × 50 Reaktionen*	S2028
SureFood® GMO QUANT RR2Y Soya	2 × 50 Reaktionen*	S2029
<b>Referenzmaterial</b>		
SureFood® GMO Plant Reference Sample	2 Gramm	S2150



SureFood® PREP Basic, Art. Nr. S1052



SureFood® GMO SCREEN

MS8/6GT73/T45 Canola

MON88302/DPO734906/RF3 Canola

MON810/TC1507/NK603/MON89034

MON87708+CV127/DP305423/MON87701/MON87769

RR-Soya/RR-2Yield Soya/A2704-12/A5547-127

FG72-Soya/DAS68416-Soya/GMB151-Soya/DAS44406-Soya

MON87705, DAS81419, MON87751, SYHT0H2

(0.1 % non-GMO soya, maize, canola, rice)

\*1 × 50 Reaktionen zur Quantifizierung des Referenzgens.